

Массажное кресло

ErgoLine 2 TE



Thai Edition

Версия с тайским массажем

Руководство пользователя

**Поздравляем с приобретением массажного кресла Ergonova ErgoLine 2 TE!
Вы сделали важный шаг для своего здоровья и хорошего самочувствия.**

Чтобы пользоваться им как можно дольше, получить максимум от его функционала и избежать трудностей, пожалуйста, полностью прочитайте содержание этого руководства и при необходимости используйте его в будущем.

Желаем успехов в использовании массажного кресла Ergonova Ergoline 2 TE.
Мы работаем для вашего здоровья и удовольствия!

Необходимые условия для работы кресла

- Во избежание появления плесени, поражения электрическим током, возгорания и неисправностей не устанавливайте массажное кресло в местах с повышенной влажностью воздуха, например, в сауне или в парной.
- Не используйте массажное кресло на открытом воздухе.
- Не используйте массажное кресло в пыльных и грязных помещениях.
- Во избежание возгорания не подвергайте массажное кресло воздействию прямых солнечных лучей или нагревательных приборов.
- Установите массажное кресло на ровной поверхности.
- Основание кресла должно касаться пола.
- Во избежание поражения электрическим током массажное кресло должно быть обязательно заземлено
- Не курите во время использования кресла.



При наличии следующих заболеваний или симптомов проконсультируйтесь с врачом

- онкология
- сердечные заболевания
- серьезные кожные заболевания
- гиперостоз
- беременность или период менструаций
- если вам прописан полный покой
- искривление позвоночника
- артрит
- кардиостимуляторы
- нарушения кровообращения
- нарушения умственных способностей
- нарушения терморегуляции
- заболевания органов пищеварительной системы (гастрит, энтерит, диарея, гепатит)

Меры предосторожности

Следующие значки указывают на меры предосторожности, которые помогут Вам использовать кресло правильно и предотвратить получение травм и повреждений во время эксплуатации



Разбор и ремонт кресла должен проводить только специалист сервисного центра. В противном случае, возможно возгорание или электрический шок.



Во избежание поражения электрическим током или возгорания во время чистки кресла не допускайте попадания влаги на переключатель и разъемы.



Всегда отсоединяйте вилку кабеля питания от розетки во время хранения или обслуживания. Не прикасайтесь к кабелю питания мокрыми руками.



Всегда отсоединяйте вилку кабеля питания от розетки во время чистки или перемещения кресла. Во избежание поражения электрическим током или возгорания отсоединяйте вилку от розетки.



Во избежание коррозии, повреждений изоляции проводов, поражения электрическим током или опрокидывания кресла следует устанавливать кресло на плоской поверхности.



Во избежание возгорания отсоединяйте вилку от розетки во время хранения кресла. Во избежание возгорания периодически удаляйте пыль с контактов вилки кабеля питания.



Не используйте кресло в непредназначенных местах (ванной, на улице) и для других целей, кроме массажа. Это может привести к травмам и механическим повреждениям.



Следите за состоянием кабеля питания, не завязывайте узлом, не ставьте на него тяжелые предметы, не натягивайте и не сгибайте слишком сильно.



Для хранения поставьте кресло на ровную поверхность. Во время землетрясения или от воздействия иной силы кресло может опрокинуться и привести к повреждениям или несчастным случаям.



Поверхности устройства нагреваются в процессе работы, поэтому люди, чувствительные к теплу, должны быть осторожны во время использования устройства.

Меры предосторожности



Вносить изменения в конструкцию кресла и производить замену его деталей может только специалист сервисного центра. Во избежание поражения электрическим током, возгорания и травм не доверяйте ремонт кресла никому, кроме специалистов.



Не храните кресло вблизи нагревательных приборов и открытого огня. Нарушение техники безопасности может привести к повреждениям конструкции, возгоранию и травмам.



При возникновении аварийной ситуации (например, при появлении запаха гари) незамедлительно остановите работу кресла и отсоедините кабель питания из розетки. Дальнейшее использование кресла может привести к поражению электрическим током. Пожалуйста, обратитесь за ремонтом в сервисный центр или уведомите о проблеме продавца.



Во избежание коррозии, повреждений изоляции проводов, поражения электрическим током или опрокидывания кресла следует устанавливать кресло на плоской поверхности.



Используйте только номинальное напряжение.



В случае повреждения кабеля питания незамедлительно остановите работу кресла.



Во избежание травм и повреждений перед включением убедитесь, что вблизи кресла нет детей.




Не подвергайте массажное кресло воздействию прямых солнечных лучей.



При обнаружении повреждений кабеля питания обратитесь в сервисный центр или к продавцу для его замены.

Наименование компонентов кресла

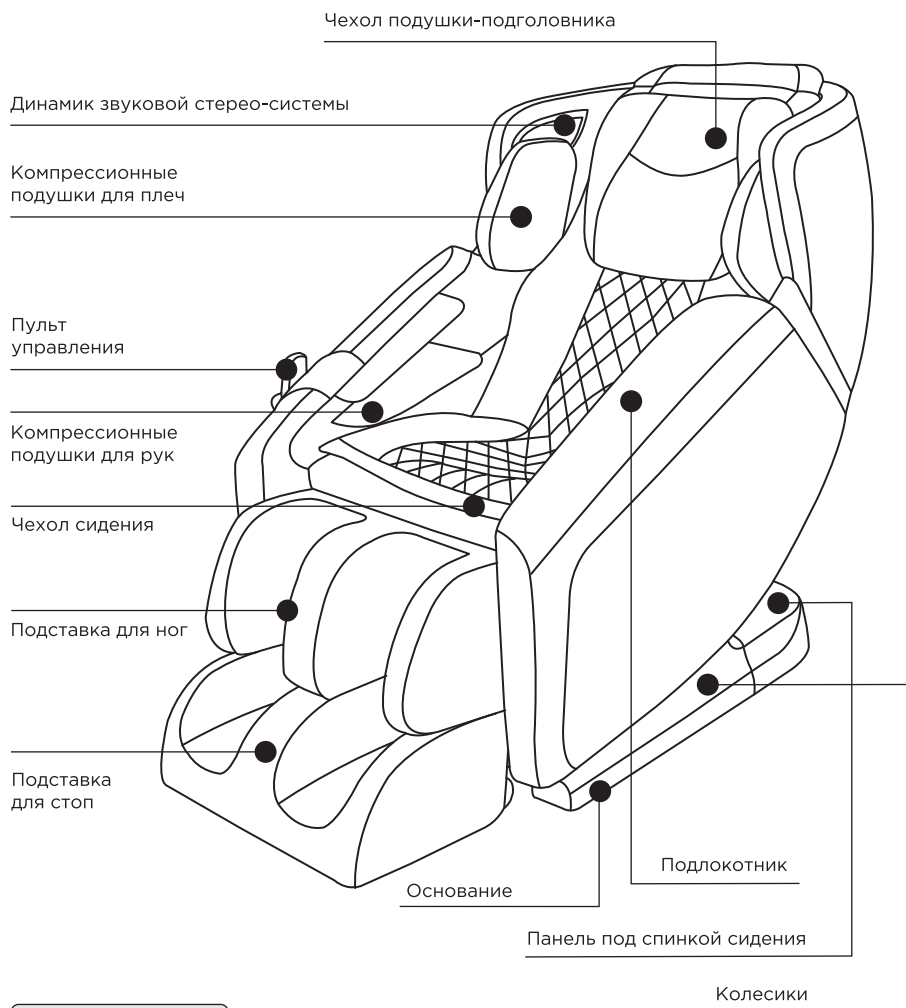

ВНИМАНИЕ

Массажное кресло не предназначено для использования лицами (в том числе детьми) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или имеющими недостаточный опыт или знания, если только они не находятся под присмотром или были проинструктированы по поводу использования кресла лицом, ответственным за их безопасность. Следите за тем, чтобы дети не играли с креслом. Поверхности кресла нагреваются в процессе работы, поэтому люди, чувствительные к теплу, должны быть осторожны во время использования кресла.

Пульт управления




Руководство по эксплуатации

1. Вставьте вилку питания в розетку.

Переместите переключатель в положение «Вкл».

Вставьте вилку питания в разъем, расположенный под спинкой сидения, а затем подсоедините вилку питания к розетке. Переместите переключатель в положение «вкл».

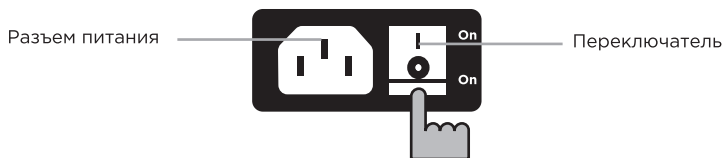

2. Сядьте в кресло и нажмите кнопку «Вкл/выкл».

Включите кресло с помощью светящейся кнопки «вкл/выкл» на пульте управления. После этого массажное кресло перейдет в режим ожидания. Нажмите кнопку «Таймер» для настройки времени массажа. Выберите 5, 10, 15, 20, 25 или 30 минут.




3. Отрегулируйте спинку сидения и подставку для ног.

С помощью кнопок на пульте управления отрегулируйте угол наклона спинки кресла и ног.

Функция нулевой гравитации, или Zero-G (англ. Zero Gravity) – это режим работы кресла, при котором ноги находятся выше головы, и тело располагается в идеальном для расслабления положении.

Для включения функции нажмите кнопку «нулевая гравитация». Повторное нажатие кнопки вернет кресло в исходное положение.

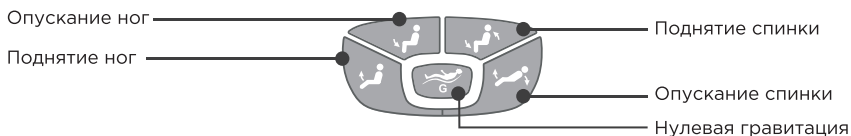

4. Остановка работы кресла.

Нормальная остановка кресла: по истечении 15 минут (по умолчанию) кресло завершит программу массажа и останется в отрегулированном положении. Вынужденная остановка: нажатие кнопки «пауза» приостанавливает работу кресла. Повторное нажатие кнопки возобновит массаж.



Руководство по эксплуатации

5. Начните массаж.

Программы автоматического режима	
	Сон - программа для расслабления и подготовки организма к глубокому, качественному сну
	Тай - эксклюзивная программа тайского массажа с эффективной растяжкой, повышает гибкость и эластичность мышц
	Релакс - деликатная программа для комплексного расслабления мышц
	Спорт - программа для быстрого и эффективного восстановления после тренировок
	Красота - приятный массаж, который снимает усталость, улучшает состояние кожи и эффективно прорабатывает все группы мышц
	Тонус - программа помогает восстановить силы, получить прилив энергии, избавиться от сонливости и повысить концентрацию внимания
	Спа - программа активизирует обменные процессы, снимает стресс и симптомы усталости

*Время массажа для выше перечисленных программ составляет 15 минут, интенсивность воздушных подушек по умолчанию задана «низкая».



Нажмите кнопку, чтобы изменить интенсивность воздушно-компрессионного массажа.

* Вышеуказанные программы массажа не могут быть объединены с другими режимами.







ВНИМАНИЕ

Используйте только номинальное напряжение 220В во избежание повреждения электронных составляющих кресла.

Руководство по эксплуатации

Ручные программы

Нажмите на кнопку «М» (англ. manual - ручной) 1, 2, 3 или 4 раза для выбора ручной программы.



Кнопка	Режим	Описание
 x1	Разминание	Плавные и ритмичные движения для повышения мышечного тонуса, усиления кровотока и проработки триггерных точек
 x2	Постукивание	Движения снимают излишнее напряжение мышц и активизируют обмен веществ всего организма
 x3	Разминание + постукивание	Сочетание двух мощных техник массажа, приводит в тонус даже те мышцы, которые долго находились в неподвижном положении
 x4	Поколачивание	Ритмичные поколачивающие движения для снятия напряжения и усталости

Вышеуказанные программы роликового массажа могут быть объединены с компрессионными режимами.

Ширина движения массажных роликов для выше указанных программ ручного режима массажа по умолчанию «средний». Скорость и ширина движения массажных роликов может изменяться.

Руководство по эксплуатации

Описание функций кнопок пульта управления

Кнопка	Режим	Описание
	Регулировка скорости	3 уровня на выбор: низкая, средняя, высокая
	Регулировка ширины движения массажных роликов	3 уровня на выбор: малый, средний, большой
	Массаж всего тела / массаж выбранной области	Нажмите на кнопку один раз, чтобы начать массаж всего тела.
	Перемещение массажного ролика выше	Нажмите на кнопку два раза, чтобы начать массаж выбранной области. Нажмите на кнопку три раза, чтобы выйти.
	Перемещение массажного ролика ниже	Нажмите кнопку, чтобы переместить массажный ролик. Когда ролик окажется в нужном месте, отпустите кнопку.

Руководство по эксплуатации

Описание функций кнопок пульта управления

Кнопка	Режим	Описание
	Регулировка интенсивности воздушно-компрессионного массажа	Регулировка осуществляется только в программах воздушно-компрессионного массажа. Три уровня интенсивности: низкая, средняя, высокая.
	Воздушно-компрессионный массаж режим 1	Нажмите на кнопку один раз, чтобы начать воздушно-компрессионный массаж всего тела. Нажмите повторно, чтобы закончить массаж.
	Воздушно-компрессионный массаж режим 2	Нажмите один раз, чтобы начать воздушно-компрессионный массаж плеч. Два раза – массаж рук. Три раза – массаж ног. Четыре раза – массаж стоп. Пять раз – выйти.
	Роликовый массаж	Нажмите на кнопку, чтобы начать роликовый массаж стоп. Нажмите повторно, чтобы закончить массаж.
	Подогрев	Подогрев поясницы. Нажмите на кнопку, чтобы включить подогрев поясничной области. Нажмите повторно, чтобы выключить его.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МУЗЫКИ

Воспроизведение музыки со смартфона: Включите функцию Bluetooth на своем телефоне, подключитесь к Bluetooth кресла и запустите прослушивание музыки. Музыка будет воспроизводиться через динамики кресла.

Указания по технике безопасности

1. При возникновении аварийной ситуации немедленно остановите работу кресла и отсоедините кабель питания из розетки.
2. При обнаружении повреждений кабеля питания обратитесь в сервисный центр для его замены или приобретите такой же в специализированном магазине.



ВНИМАНИЕ

Во избежание поражения электрическим током или возгорания не доверяйте ремонт, внесение изменений в конструкцию кресла и замену его деталей никому, кроме специалиста сервисного центра.

Уход за креслом

Рекомендации по хранению:

- Не разбирайте спинку кресла. Возможно поражение электрическим током.
- Разбор и ремонт кресла должен производить только специалист сервисного центра. В противном случае возможно поражение электрическим током или возгорание.
- Во избежание поражения электрическим током или травм отсоединяйте кабель питания от розетки во время чистки кресла.
- Регулярно очищайте кресло от пыли. Не используйте его в помещениях с повышенной влажностью.
- Если кресло не используется в течение длительного времени, накройте его чехлом для защиты от пыли.
- Не подвергайте массажное кресло воздействию прямых солнечных лучей.

Уход за обивкой:

- Используйте нейтральные чистящие средства.
- С помощью нейтрального чистящего средства очистите спинку кресла, подголовники подставку для ног. Оставьте высохнуть.
- С помощью чистящего средства и мягкой ткани очистите пластиковые элементы, трубные и кожаные элементы массажного кресла.
- Во избежание выцветания, раннего старения или появления трещин на коже не допускается использование органических растворителей, например, бензина или спирта.
- Во избежание поражения электрическим током или возгорания не распыляйте пестициды на обивку кресла.
- Используйте сухую ткань для ухода за креслом.

Уход за панелью управления:

- Не устанавливайте кресло вблизи нагревательных приборов и открытого огня.
- Во избежание поражения электрическим током не используйте кресло в помещениях с повышенной влажностью.
- Удаляйте пыль с элементов кресла при помощи мягкой ткани или щетки.
- Не допускается использование органических растворителей, например, бензина или спирта.

Устранение неполадок

При частом использовании рекомендуется регулярно осматривать кресло на предмет повреждений.

Если кресло не использовалось в течение нескольких лет, то перед включением осмотрите кресло на предмет повреждений.

Проблема	Решение
Кресло не включается и индикатор не светится Наличие звуков	<ul style="list-style-type: none">• Проверьте, включена ли вилка в розетку.• Проверьте, включен ли переключатель питания. <p>Указанные ниже звуки являются нормальными:</p> <ul style="list-style-type: none">• Звуки в режимах постукивания и разминания.• Интенсивность звуков меняется при изменении скорости массажа.• Звук работающего мотора во время массажа.• Звук вибрации спинки кресла.• Звук подачи и спуска воздуха.• Звук надувания и сдувания воздушных подушек.• Во время регулировки подставки для ног.• Шум двигателя при повышенной нагрузке.

Технические характеристики

Наименование	Массажное кресло Ergonova
Модель	ErgoLine 2 TE
Напряжение	220В ~ 50Гц
Номинальная мощность	150Вт
Габариты	113*144*73 см

Ergonova - немецкий бренд массажного оборудования первоклассного качества.

С 2009 года десятки тысяч людей улучшили качество своей жизни и ощутили преимущества продукции. Отличительные особенности оборудования Ergonova – надежность и долговечность, новейший современный функционал, удобство использования и стильный дизайн.

Генеральный импортер в России: ООО «Макс Концепт», ОГРН 1147453008532
Москва, Люберецкий р-он, г. Котельники, 1-й Покровский пр-д, д.5,
тел. 8-800-700-14-29

 www.ergonova.ru

 info@ergonova.ru



Авторское право © 2012г.
Ergonova GmbH
Все права защищены

Полный перечень представительств: <http://ergonova.ru/about/stores>.
Все авторские права на тексты и изображения принадлежат Ergonova GmbH и не могут использоваться без согласия правообладателя.



ERGONOVA

I FEEL GOOD!



EAC

Designed by Ergonova Germany

www.ergonova.com

