

MaxBURN

MASSAGE SYSTEM

2 IN 1

Перкуссионный массажер с ремнем



Руководство пользователя

Поздравляем с приобретением перкуссионного массажера с ремнем Вы сделали важный шаг для своего здоровья и хорошего самочувствия.

Чтобы пользоваться им как можно дольше, получить максимум от его функционала и избежать трудностей, пожалуйста, полностью прочитайте содержание этого руководства и при необходимости используйте его в будущем.

Ergonova - немецкий бренд массажного оборудования первоклассного качества.

С 2009 года десятки тысяч людей улучшили качество своей жизни и ощутили преимущества продукции. Отличительные особенности оборудования Ergonova – надежность и долговечность, новейший современный функционал, удобство использования и стильный дизайн.

СОДЕРЖАНИЕ


ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА	3
ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ	3
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАРЯДКЕ	3
ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ	4
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК	4
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	6

Характеристики продукта

Скорости: 4
Источник питания: постоянный ток
Тяговое усилие: 27-36 кг
Напряжение: 7,4 Вт
Обороты двигателя: 1800-3000 об/мин
Емкость аккумулятора: 2500 мАч
Вес нетто изделия: 0,7 кг

Переключатель: кнопочный
Материал корпуса: ABS-пластик окрашенный
Мощность: бесщеточный двигатель мощностью 30 Вт
Диаметр двигателя: 35 мм
Время зарядки: 6-8 часа
Время работы: 8-10 часов
Вес брутто изделия: 0,9 кг

Описание деталей

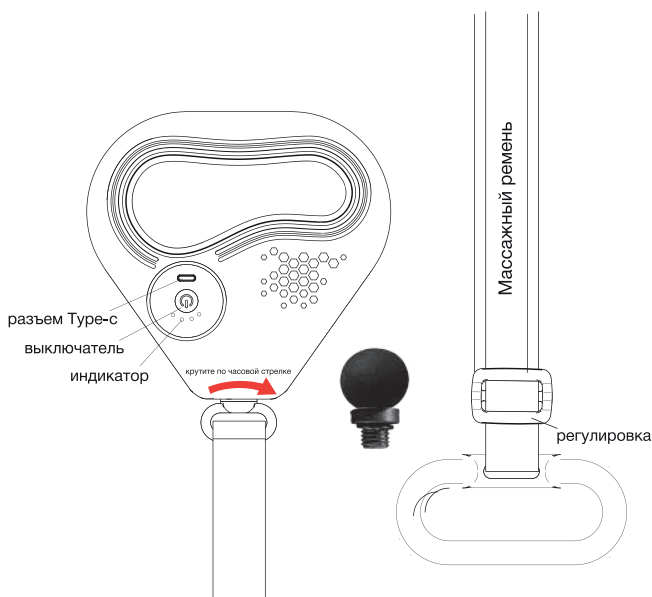

Инструкция по зарядке

1. Кнопка включения / выключения питания (индикатор выключен, длительное нажатие для включения / длительное нажатие для выключения).
2. Короткое нажатие меняет скорость.
3. Пожалуйста, используйте адаптер питания 5В для зарядки.
4. В первый раз, пожалуйста, заряжайте устройство в течение 3 часов. Соедините кабель передачи данных с адаптером 5В.
5. Во время зарядки будут мигать четыре индикатора, и эти четыре индикатора всегда будут гореть при полной зарядке. Они по очереди бывают красными, желтыми и зелеными.

Инструкция по технике безопасности

Чтобы снизить риск поражения электрическим током, пожара и травм, данное изделие необходимо использовать в соответствии со следующими инструкциями.

Только для совершеннолетних

- Используйте массажер только на сухой и чистой поверхности кожи, без одежды. Надавите и аккуратно проведите им по коже.
- Используйте массажер только на мягких тканях тела, не причиняя боли или дискомфорта.
- Длина массажного пояса регулируется. Не затягивайте пояс слишком туго.
- Возможно появление синяков даже при умеренном или нормальном надавливании. Всегда проверяйте область, подвергающуюся массажу, на наличие синяков.
- В случае возникновения боли или дискомфорта, пожалуйста, немедленно прекратите его использование.
- Пальцы, волосы или другие части тела следует держать подальше от стержня и задней части вибрирующей головки, так как они могут быть защемлены.
- Не помещайте никаких предметов в вентиляционное отверстие оборудования.
- Не погружайте массажер в воду и не допускайте попадания воды в вентиляционное отверстие. Не роняйте массажер и не используйте его в других целях. Во время зарядки используйте только адаптер 5В постоянного тока. Пожалуйста, тщательно проверяйте массажер и аккумулятор перед каждым использованием. Запрещается разбирать и модифицировать устройство.
- Не оставляйте и не заряжайте устройство без присмотра.

Обратите внимание

1. Для предотвращения трения и износа между контактными зонами массажера необходимо смазывать его маслом. Следите за тем, чтобы не испачкать одежду. Очистите и протрите поверхность массажера перед длительным хранением.
2. Данное устройство нельзя использовать во время зарядки. Зажмите кнопку питания, чтобы включить или отключить массажер.
3. Устройство автоматически выключается каждые 10 минут.

Гарантийный срок

Гарантия не подлежит передаче. С момента покупки пользователь в течение гарантийного срока при наличии действительных документов может пользоваться гарантийным обслуживанием (внешние повреждения и износ, вызванные механической эксплуатацией, не подпадают под действие гарантии).

Гарантия не распространяется на нижеследующее

1. Случайное повреждение, неправильное использование, хранение или транспортировка.
2. Неправильное техническое обслуживание изделия.
3. Нарушение инструкций по эксплуатации изделия.

Технические характеристики

Наименование: Перкуссионный массажер с ремнем

Модель: MaxBurn

Напряжение: 7,4 Вт

Потребляемая мощность: 30 Вт

Емкость аккумулятора: 2500 мАч

Производитель: ZHEJIANG HALLEY POWER MACHINE CO

Адрес производства: NO.22 DANGUI SOUTH ROAD, CHENGXI NEW AREA,
YONGKANG CITY, ZHEJIANG, CHINA

Дата производства: смотрите на упаковке

Сделано в Китае

Генеральный импортер в России:

ООО «Макс Концепт», ОГРН 1147453008592

Москва, Люберецкий р-н, г. Котельники, 1-й Покровский пр-д, д.5

тел. 8-800-700-14-29

www.ergonova.ru

info@ergonova.ru

Полный перечень представительств: <http://ergonova.ru/stores/>

Все авторские права на тексты и изображения принадлежат Ergonova GmbH и могут использоваться только с согласия правообладателя.

Авторское право © 2012г.

Ergonova GmbH

Все права защищены





Designed by Ergonova Germany

www.ergonova.ru

